



**Ultra-Low-Dead-Space (ULDS) Injektionsnadel mit großem Innendurchmesser von ZELOSTAT® für Mikroinjektionen von Botulinumtoxin**

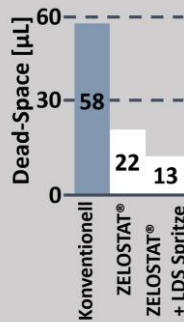

**MEHR PRODUKT FÜR IHREN PATIENTEN**

Die Low-Dead-Space Technologie basiert auf einem flexiblen Polymerring, der den Totraum zwischen Nadel und Spritze ausfüllt und so die Produktverschwendung drastisch reduziert.

Bei dreimaligem Nadelwechsel lassen sich bereits deutlich über 100µl (0,1ml) einsparen, was einem zusätzlichen Injektionspunkt für Ihren Patienten entspricht. In Kombination mit einer Proma inject Low-Dead-Space Spritze ist die Effizienz sogar noch höher.

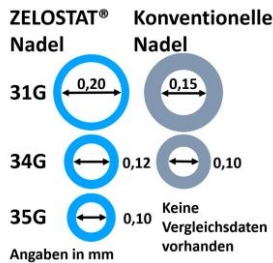


**BEHALTEN SIE IHRE ROUTINE BEI**

Mit einem Innendurchmesser von ca. 0,1mm bietet unsere 35G Nadel einen Durchfluss und Kolbendruck der einer herkömmlichen 34G Nadel ähnlich ist.

Behalten Sie Ihre Injektionstechnik bei - der Injektor spürt kaum einen Unterschied, der Patient fühlt weniger Nadel.

**MEHR KOMFORT FÜR IHREN PATIENTEN, GERINGERES RISIKO VON HÄMATOMBILDUNG**

Ca. 40% dünner\* als herkömmliche 34G Nadeln. Unsere 35G ULDS Nadel kann das Risiko von injektionsbedingten Nebenwirkungen verringern und so den Komfort für den Patienten während der Injektion erhöhen - weniger sichtbar als *invisible*, sie ist ätherisch.

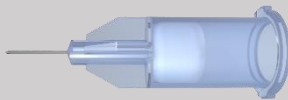

Artikelnummer	Außendurchmesser	Länge	Packungsgröße
100533	31G (0.25mm)	13mm	100stk
100532	31G (0.25mm)	9mm	100stk
100525	31G (0.25mm)	4mm	100stk
100539	34G (0.18mm)	9mm	100stk
100538	34G (0.18mm)	4mm	100stk
100543	35G (0.16mm)	4mm	100stk
100543-1	35G (0.16mm)	4mm	50stk

Bestellen Sie hier:



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Richtlinie und können Änderungen unterliegen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

Promainject ist Teil von PromaMedical GmbH  
Wernher-von-Braun-Straße 10  
85640 Putzbrunn - Munich,  
Germany

T: +49 (0)89 7474713-0  
F: +49 (0)89 7474713-1  
M: info@promainject.com  
W: www.promainject.com

emailen Sie uns:



\* 39,82% im Vergleich der Fläche im Querschnitt zur TSK, THE INVISIBLE NEEDLE™